

GenENDO Remover

NiT Ti Root Canal Instruments

fr - Désopturation/retrait de Gutta-Percha

en - Gutta-Percha desobturación/removal

es - Desobturación/remoción de la gutapercha

de - Desobturación/Entfernung von Gutta-percha

it - D'istruzione/rimozione di gutaperca

nl - De-obsturatie/verwijdering van gutapercha

pl - Udrożnienie/usuwanie gutaperki

tr - Güta perka obturasyonunu giderme/çıkarma

ar - إخراج/إزالة غطاء جوتا بيرشا

IFU creation: 2025-04-07
Date of IFU revision: 2025-04-07


CE 0459

58, rue du Pont de Crétel
94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Micro-Mega SA
12, rue du Tunnel
25000 BESANCON - FRANCE

30006349-A M05 98 037 20 00

Remover Protocol

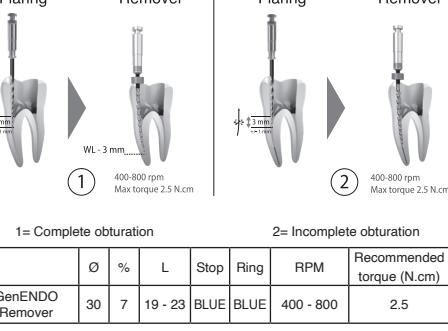

INSTRUCTION D'UTILISATION

1. Indication

Flaring : Evaser le canal radiculaire durant un traitement et un retraitement endodontique non chirurgical.
Remover : Désopturation à base de Gutta Percha durant un retraitement endodontique.

Utilisation par un professionnel dentaire unique.

2. Contre-indication

En cas d'obstruction importante de moins de 3 mm (cavité d'éthylène utilisée dans le processus d'estérilisation), il n'est pas recommandé d'utiliser la utilisation de Remover pour traiter endodontiquement une dent par voie orthograde.

3. Effets indésirables/ Complications

Dans les cas d'anatomie complexe et/ou en fonction du matériau d'obturation, un risque périopératoire (rupture, ouverture, zipping, stripping, butte) pourrait se produire et induire un risque postopératoire.

4. Mise en garde!

Le dentiste est l'instrument endodontique doit être relayé à l'expertise du cas clinique en particulier pour une anatomie canalaire jute trop complexe.

Patients identifiés comme possédant un risque d'endocardite infectieuse.

Content du nickel et du titane : ne doit pas être utilisé chez les personnes présentant une allergie connue à ces métaux.

Respecter les procédures dentaires en particulier l'utilisation d'une aiguille dentaire et des gants.

Utiliser en rotation continue à la vitesse préconisée.

Dans les cas d'obstruction importante, le temps d'immersion maximum peut être dépassé et une valeur recommandée de 15 minutes.

Utiliser conformément à la technique recommandée (§7).

Ne pas utiliser en dehors de la désobturation à base de Gutta Percha.

Instrument fourni stérile : Suivre la procédure de reprocessing (§9) avant utilisation.

Instrument fourni stérile : Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation. Si endommagé, ne pas utiliser l'instrument.

Si applicable, respecter la date de péremption.

Ne pas utiliser si cassé.

Usage unique : ne doit pas être réutilisé.

Materiale necessario	<ul style="list-style-type: none"> Guanti, mascherine, camice, secondo quanto raccomandato dal produttore del detergente Detergente (neodisher® Septo Active) Detergente (neodisher® MediZym) Spazzolini piccoli morbidi Apparecchi di sterilizzazione Bagno ad ultrasuoni o termoinfettore Apparecchi di sterilizzazione di classe B <p><i>Note: tutti i materiali utilizzati devono essere puliti e sostituiti regolarmente. Identificare il materiale utilizzato per ogni fase del processo (trattamento iniziale, pulizia o risciacquo).</i></p>
----------------------	---

10. Smaltimento

Dopo l'uso, sistematicamente gli strumenti in un contenitore sicuro, utilizzato per raccolgere gli strumenti taglienti o acuminati (ad es. aghi o lame monouso) secondo le buone pratiche odontoiatriche.

11. Simboli

CLASSICS

Impugnatura "CLASSICS"

Non usare se la confezione è danneggiata

Anno marcatura CE: 2019

12. Bepakkingen en verpakking van de enkele instrumenten

13. Bemiddelde materialen

14. Automaat

15. GEBRUIKSAANWIJZING

1. Indicatie

2. Contra-indicaties

3. Operatie

4. Karakteristieken

5. Kliniek iddialar

6. Sterilisatie

7. Kontrola vrzovka

8. Instrukcja przygotowania do ponownego użycia

9. Zalecenia ogólne

10. Ostatyczne

11. Symbol

12. Organizacja do przygotowania do ponownego użycia

13. Oznaczenia

14. Przeciwskazania i kontraindikacje

15. Wskazówki

16. Alergiczność

17. Szczepienia/plukanie/suszenie

18. Temizleme/Durulama/Kuruma

19. Etiketleme

20. Paketleme simgesi

21. Paketleme simgesi

22. 5. Klinik İddialar

23. Sterilezze

24. Kontrola vrzovka

25. Bemiddelde materialen

26. Automaat

27. GEBRUIKSAANWIJZING

28. Bemiddelde materialen

29. Automaat

30. GEBRUIKSAANWIJZING

31. Bemiddelde materialen

32. Automaat

33. GEBRUIKSAANWIJZING

34. Bemiddelde materialen

35. Automaat

36. GEBRUIKSAANWIJZING

37. Bemiddelde materialen

38. Automaat

39. GEBRUIKSAANWIJZING

40. Bemiddelde materialen

41. Automaat

42. GEBRUIKSAANWIJZING

43. Bemiddelde materialen

44. Automaat

45. GEBRUIKSAANWIJZING

46. Bemiddelde materialen

47. Automaat

48. GEBRUIKSAANWIJZING

49. Bemiddelde materialen

50. Automaat

51. GEBRUIKSAANWIJZING

52. Bemiddelde materialen

53. Automaat

54. GEBRUIKSAANWIJZING

55. Bemiddelde materialen

56. Automaat

57. GEBRUIKSAANWIJZING

58. Bemiddelde materialen

59. Automaat

60. GEBRUIKSAANWIJZING

61. Bemiddelde materialen

62. Automaat

63. GEBRUIKSAANWIJZING

64. Bemiddelde materialen

65. Automaat

66. GEBRUIKSAANWIJZING

67. Bemiddelde materialen

68. Automaat

69. GEBRUIKSAANWIJZING

70. Bemiddelde materialen

71. Automaat

72. GEBRUIKSAANWIJZING

73. Bemiddelde materialen

74. Automaat

75. GEBRUIKSAANWIJZING

76. Bemiddelde materialen

77. Automaat

78. GEBRUIKSAANWIJZING

79. Bemiddelde materialen

80. Automaat

81. GEBRUIKSAANWIJZING

82. Bemiddelde materialen

83. Automaat

84. GEBRUIKSAANWIJZING

85. Bemiddelde materialen

86. Automaat

87. GEBRUIKSAANWIJZING

88. Bemiddelde materialen

89. Automaat

90. GEBRUIKSAANWIJZING

91. Bemiddelde materialen

92. Automaat

93. GEBRUIKSAANWIJZING

94. Bemiddelde materialen

95. Automaat

96. GEBRUIKSAANWIJZING

97. Bemiddelde materialen

98. Automaat

99. GEBRUIKSAANWIJZING

100. Bemiddelde materialen

101. Automaat

102. GEBRUIKSAANWIJZING

103. Bemiddelde materialen

104. Automaat

105. GEBRUIKSAANWIJZING

106. Bemiddelde materialen

107. Automaat

108. GEBRUIKSAANWIJZING

109. Bemiddelde materialen

110. Automaat

111. GEBRUIKSAANWIJZING

112. Bemiddelde materialen

113. Automaat

114. GEBRUIKSAANWIJZING

115. Bemiddelde materialen

116. Automaat

117. GEBRUIKSAANWIJZING

118. Bemiddelde materialen

119. Automaat

120. GEBRUIKSAANWIJZING

121. Bemiddelde materialen

122. Automaat

123. GEBRUIKSAANWIJZING

124. Bemiddelde materialen

125. Automaat

126. GEBRUIKSAANWIJZING

127. Bemiddelde materialen

128. Automaat

129. GEBRUIKSAANWIJZING

130. Bemiddelde materialen

131. Automaat

132. GEBRUIKSAANWIJZING

133. Bemiddelde materialen

134. Automaat

135. GEBRUIKSAANWIJZING

136. Bemiddelde materialen

137. Automaat

138. GEBRUIKSAANWIJZING

139. Bemiddelde materialen

140. Automaat

141. GEBRUIKSAANWIJZING