


Uw collageenverband
na tandextracties



Hémocollagène

Hemostatische sponjes
biocompatibel & resorbeerbaar

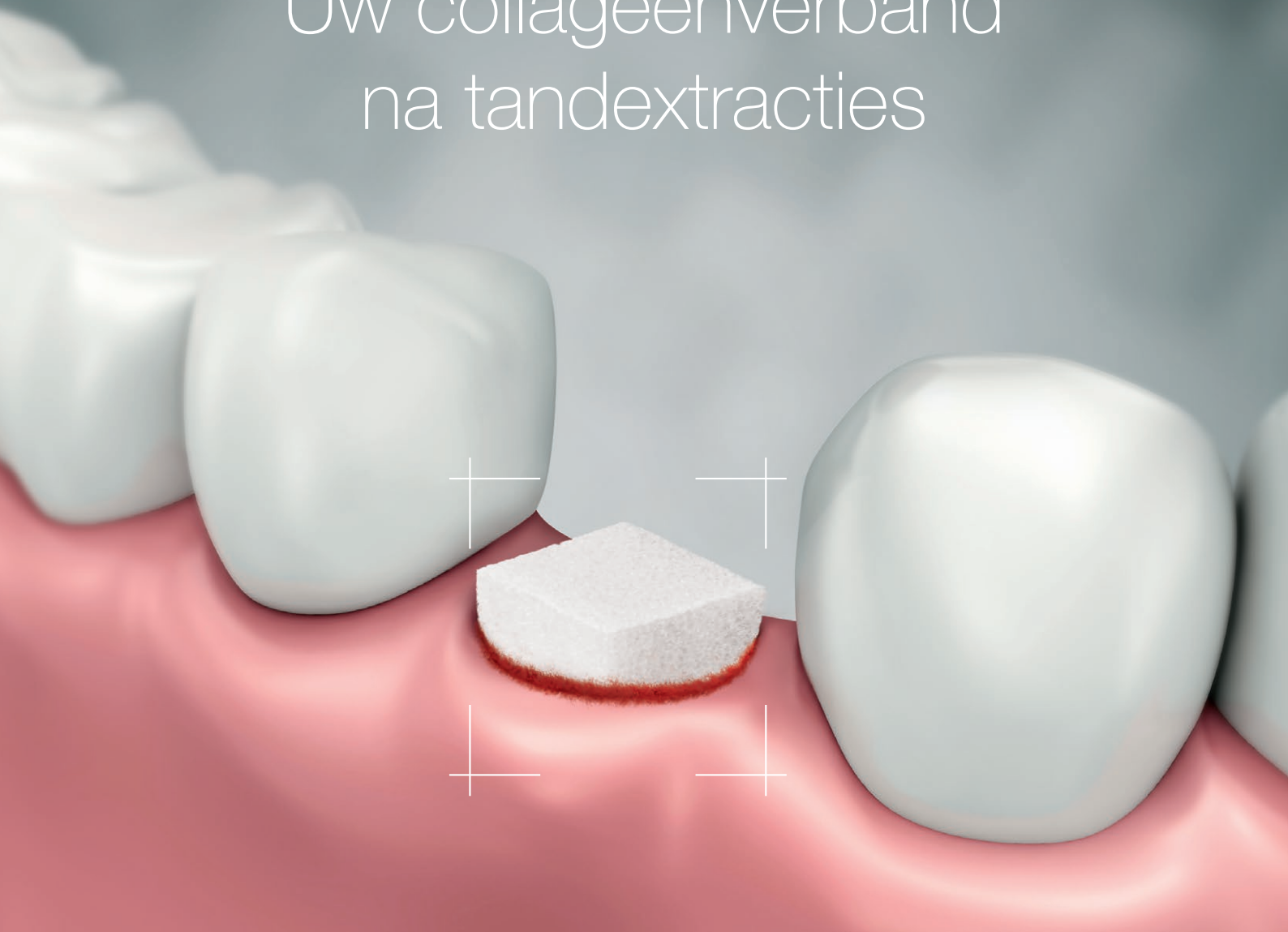

Hémocollagène is een resorbeerbaar en steriel hemostatisch sponsje van type 1 rundercollageen.

Hémocollagène is aangewezen voor lokale hemostase bij tandheelkundige ingrepen wanneer bloedstelping door afbinding of andere conventionele methoden ondoeltreffend of onpraktisch zijn. Het kan het samenklonteren van bloedplaatjes bevorderen en helpt de natuurlijke regeneratie van weefsel. De collageen sponsjes zijn biocompatibel en natuurlijk resorbeerbaar. De vorm werd speciaal ontworpen voor gebruik bij tandheelkundige ingrepen.

Kenmerken	Voordelen	Weldaden
Sponsjes in individuele blisterverpakking Flexibel, plooibaar	Vorm en afmetingen uitstekend geschikt voor plaatsing in de alveole	Flexibel, plooibaar, samenhangend. Kan op maat gesneden (en aan de opening aangepast) worden.
Collageen type 1 (van bovine oorsprong)	Zeer goed biocompatibel Natuurlijk resorbeerbaar	Aangewezen voor lokale hemostase: bevordert het hechten en samenklonteren van bloedplaatjes
Steriel	Sterilisatie door betastralen	Garandeert bewaring en steriliteit tot opening van de verpakking door de behandelende arts
Veilig	Geen gevaarlijke stoffen Voldoet aan 93/42/EEG - 722/2012	Geen overdracht van virussen en spongiforme encephalopathieën overdraagbaar door dieren. Kan in contact blijven met beschadigde bloedvaten, gingiva, tanden en bot
Implanteerbaar en resorbeerbaar	Kan in de alveole achterblijven na tandextractie	Blijft op zijn plaats door een kruissteek met hechtdraad over de alveole. Het product is na drie maanden volledig geresorbeerd.

Indicaties

Hémocollagène kan gebruikt worden bij:

- Tandextractie
- Periodontale chirurgische wonden
- Hechtingen
- Mondzweren (niet-geïnfecteerd of viraal)
- Traumatische wonden
- Wondjes/zweren t.g.v. een kunstgebit

Productinformatie

Herkomst: - Type 1 natief, niet-gedenatureerd, gevriesdroogd rundercollageen

Kenmerken: - Klasse III medisch hulpmiddel – CE 0459
- Flexibel, plooibaar, samenhangend en zacht
- 0.027 g per spons
- Biocompatibel & goed verdraagbaar

Verpakking: - Doos met 24 sponsjes
(3 blisters met 8 steriele sponsjes verpakt in individuele blisters)



Septodont – Grondwetlaan 87 - 1083 Brussel
Tel.: +32 (0)2 425 60 37 – Fax: +32 (0)2 425 36 82

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.septodont.be – www.septodont.nl

